

HD-350

Видеоэндоскопическая система высокой функциональности

HD-350 Sonoscape -
видеоэндоскопическая система
для рутинной эндоскопии,
предлагающая высокую
функциональность и непревзойденную
четкость изображения.

Видеоэндоскопическая система класса Full HD.
Ее видеоэндоскопы высокого разрешения
обеспечивают беспрецедентный уровень
четкости, открывающий новые
перспективы массовой диагностики.

Интегрированная цифровая рабочая станция:

- Встроенный жесткий диск 500 Гб для хранения изображений, видео, отчетов, данных пациентов
- **USB** порты для подключения внешних накопителей и принтеров
- Клавиатура и мышь для ввода данных пациента и управления функциями системы
- Ввод и сохранение данных о пациентах, поиск сохраненных данных
- Сохранение изображений/видео на жесткий диск с выводом на экран под основным изображением в режиме предпросмотра

Монитор медицинский высокой четкости

- Диагональ – 21,5 дюйм
- Разрешение: 1920x1080



SonoScape

 ООО «МедТехСити»



Если на вашем мобильном устройстве
установлено приложение
для считывания QR кода, пройдите
по ссылке на сайт ООО «МедТехСити».

Официальный дистрибьютор диагностического
оборудования Sonoscape в России
199004, Санкт-Петербург, пер. Биржевой д.2
Контактный телефон: 8 (812) 309 89 86
E-mail: info@mtcity-spb.com
Сайт: medtehciti.ru

Видеоэндоскопическая система HD-350 высокой функциональности и непревзойденной четкости


Устройство обработки изображений HD-350

Светодиодный источник света HDL-35E



- Программирование 4-х кнопок на рукоятке эндоскопа
- Цифровое увеличение изображения - 3 уровня, до 4-х крат
- Режим полноэкранного изображения
- Режимы структурной детализации изображения - **Edge, Structure A, Structure B**
- Режим автоматической регулировки яркости изображения
- Ручной выбор алгоритма автоматической регулировки яркости изображения - **Peak, Ave, Peak+Ave**
- Ручная настройка цветности изображения
- Ручная настройка цветовой насыщенности изображения – 3 уровня
- Сохранение до 10 комбинаций настроек параметров исследования для использования в различных областях и условиях различными специалистами
- Режим стоп-кадра, запускаемый с рукоятки эндоскопа или педали
- Автоматический баланс белого

- Основная лампа – светодиодная, срок службы до 50000 часов
- Запасная лампа - галогеновая
- Электрическая помпа, 3 уровня мощности
- Водяная струя - поток воды, подаваемый по дополнительному каналу эндоскопа (также данный канал используется для ввода лекарственных средств), оmyивает проблемные участки слизистой и существенно упрощает проведение обследования (требует подключения дополнительной помпы)
- Автоматическая и ручная регулировки силы света

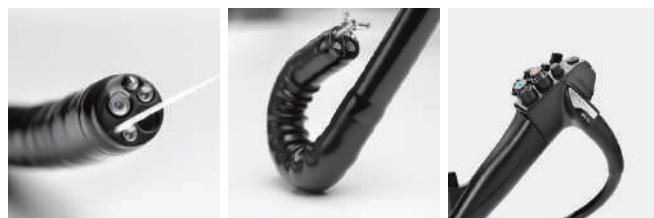

Серия видеоэндоскопов с дополнительным каналом Water-Jet совместимых с системой HD-350:

Длина рабочей части	Диаметр дистального конца	Диаметр инструментального канала	Общая длина	Глубина резкости	Угол поля зрения	Углы отклонения дистального конца вверх/вниз	Углы отклонения дистального конца вправо/влево
Видеогастроскоп EG-430							
1050 мм	9,3 мм	2,8 мм	1350 мм	3-100 мм	140°	210°/90°	100°/100°
Видеоколоноскоп EC-430T							
1680 мм	12,0 мм	3,8 мм	1980 мм	3-100 мм	140°	180°/180°	160°/160°